



Lettino Bolzano

LETTINO A 5 SEGMENTI E 2 SNODI.





Rilassati: sei in buone mani.

Ma prima di rilassarti, scopri perché dovresti sentirti teso ad acquistare un lettino di importazione a prezzi bassi.

E perché - al contrario - affidarsi a un lettino di manifattura italiana Rehatech sarà motivo di totale distensione.



Cosa faresti se il tuo lettino elettrico iniziasse a **muoversi a scatti**, anziché salire e scendere fluidamente? O se il rivestimento in ecopelle iniziasse a **rovinarsi** in breve tempo? O se i tuoi clienti ne lamentassero la scomodità?

Te lo diciamo noi: **chiameresti** chi te l'ha venduto.

Ma se chi te l'ha venduto **non sapesse nulla** del lettino che ti ha dato? Ti sembra impossibile che questo possa accadere? Succede molto più spesso di quanto credi. **Succede quando i lettini sono di importazione.**

Un fenomeno ormai dilagante. Molto spesso chi te li vende non li ha nemmeno testati. Tu li compri a scatola chiusa. E il venditore fa altrettanto, **incrociando le dita** e sperando che tutto fili liscio.

Li riconosci facilmente: sono quelli proposti a prezzi così bassi da sembrare irresistibili. Fantastici in fotografia, apparentemente uguali ai lettini Rehatech. Poi tranquillo: **ci pensa il tempo** a dimostrare la differenza. Spesso, un tempo assai breve. Quanto basta a non poter tornare sui propri passi: 2-3 anni, quando **la garanzia ormai è scaduta.**

La soluzione? Evitare il richiamo suadente del prezzo basso, che nasconde sempre fregature e delusioni, e rivolgersi a chi lavora per farti raggiungere i tuoi due obiettivi professionali. Quali sono? Scoprilì alla pagina successiva.



I tuoi due obiettivi, il nostro contributo.

*Che tu sia un fisioterapista o un medico.
Un preparatore atletico o un trainer sportivo.
Un osteopata o un massaggiatore, hai due
obiettivi in testa.*

1. Il primo è **risolvere le problematiche** dei tuoi pazienti.
2. Il secondo è essere considerato da loro un **vero professionista**.

Posizionare i tuoi pazienti su lettini scomodi, inadeguati, che si muovono a scatti e si rovinano, non ti aiuterà a raggiungerli.

I lettini Rehatech invece saranno fra i fiori all'occhiello del tuo **status professionale**. Dureranno una vita. E i tuoi pazienti ne riconosceranno il comfort.

E questo perchè sono tutti prodotti in Italia. **Zero importazione**.
E zero rivenditori terzi. Li acquisti direttamente da noi, che ne siamo i **produttori**.

Per qualunque domanda, qualunque richiesta di **assistenza**, qualunque soluzione, noi non incrociamo le dita: noi ci siamo.

E se proprio dovesse esserci un problema, basta un colpo di telefono. Noi, come te, **sappiamo dove mettere le mani**.



Manifattura Italiana.

Garanzia assoluta.

I motori elettrici sono di origine tedesca. Gli altri componenti di manifattura italiana. Tutti i lettini sono marchiati CE.

Li abbiamo progettati con la collaborazione dei tuoi colleghi, professionisti italiani della riabilitazione come te.

Rehatech è un brand di Genesi, licenziataria in esclusiva per l'Italia dei marchi Balanced Body e Sissel. Con 25 anni di clienti soddisfatti.

I lettini Rehatech sono prodotti in Veneto, in uno dei distretti italiani più noti per lavorazione del metallo e la manifattura di qualità.

LETTINO BOLZANO. 11 CARATTERISTICHE PER 11 BENEFICI.

- 1. Struttura in acciaio al carbonio Axel E220+CR2S3.** Sulla robustezza non si scherza e il lettino durerà una vita.
- 2. Verniciatura con polvere antigraffio Scratchproof.** Per un lettino sempre nuovo e professionale, come il primo giorno.
- 3. Imbottiture in espanso ad alta densità T30D altezza 4 cm.** Per accogliere e dare comfort ai tuoi pazienti.
- 4. Angoli del piano arrotondati e imbottiti.** Per la tua comodità di azione sul lettino, senza brutte sorprese.
- 5. Rivestimento in Skai Tech altamente elasticizzato.** Per una superficie comoda e performante, che dura nel tempo.
- 6. Palette di 12 colori a disposizione per il rivestimento.** Per coordinarsi ai colori del tuo studio, anche l'occhio vuole la sua parte.
- 7. Testiera con foro di respirazione Drop o cuscinetto Moonlight.** Per accogliere i tuoi pazienti in posizione prona.
- 8. Due versioni di motore elettrico Hanning SL80/6000N e SL95/10000N.** Per regolare l'altezza con potenza, portanza e velocità.
- 9. Pedaliera a pavimento AirGo con impulsi ad aria.** Per prevenire il rischio di scosse, evitando il contatto diretto del piede con i cavi elettrici.
- 10. Segmenti servoassistiti tramite pistoncini a gas Stabilus.** Per regolare facilmente l'inclinazione, anche durante i trattamenti.
- 11. Interruttore di sicurezza Safety Stop Box.** Per evitare che qualcuno possa azionare il lettino in tua assenza e prevenire incidenti dovuti a uso di terzi.



Lettino **Bolzano**

Lettino a 5 segmenti e 2 snodi. Appoggia braccia regolabili.



Testiera regolabile 40° in positivo e 30° in negativo.

Angolazione poggiambracci 60°. Posizione Trendelenburg 30°.

Angolazione a tetto 30°.



POSIZIONI

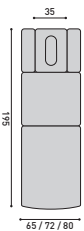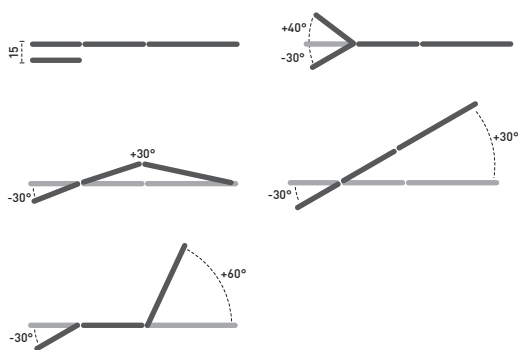

DATI TECNICI

Larghezza **65 - 72 - 80 cm**

Scegli fra 3 misure in base al tipo di azione terapeutica.

Lunghezza **195 cm**

Per accogliere anche persone di grande statura.


Altezza **49 - 87 cm**

Scende fino a 49 cm e sale fino a 87 cm.

Portata **180 kg**


Sostiene anche persone di grande peso.



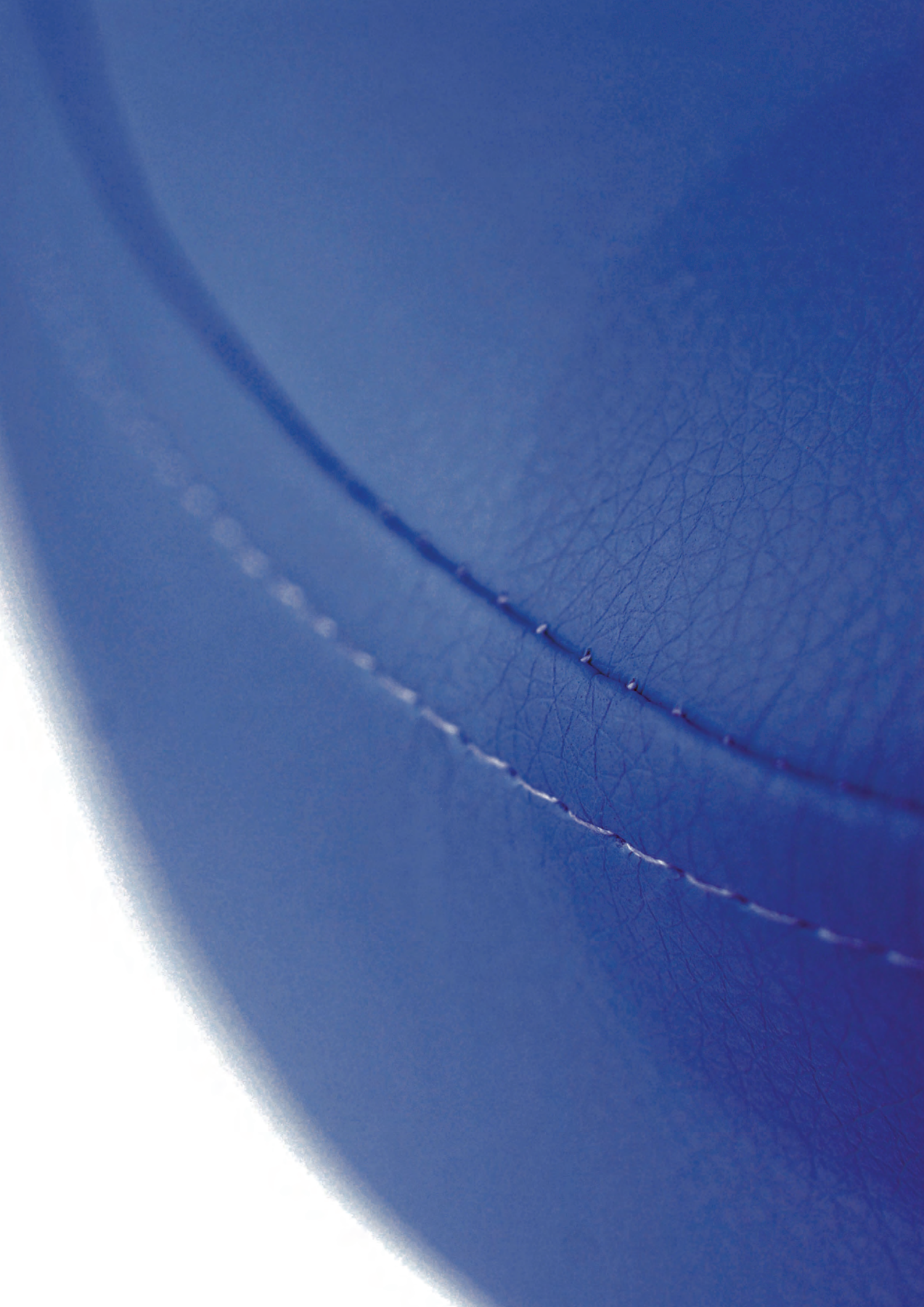

Colori di rivestimento

IL MORBIDO E CONFORTEVOLE
RIVESTIMENTO IN SKAI ELASTICIZZATO
È DISPONIBILE IN 12 COLORI A SCELTA.

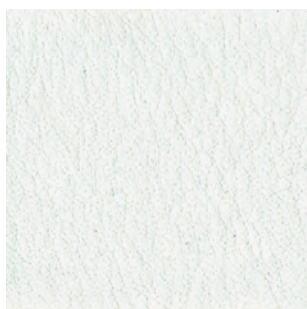

Bianco



Crema



Perla




Sabbia



Mais



Safran

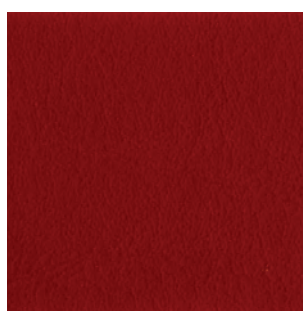


Rosso



Royal



Acqua

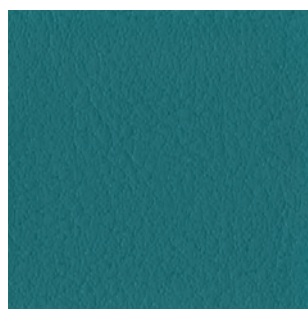

Agave



Sky



Atollo



Accessori lettino Bolzano

DI SERIE



Testiera Drop con foro a goccia per accogliere il volto del paziente in posizione prona. Tappo in dotazione.



Motore SL80/6000N lavora a 6.000 Newton per movimentare il lettino da 49 a 87 cm in altezza in 6 mm al secondo.



Pedaliera AirGo per controllo a pavimento con impulsi ad aria, utile a prevenire ogni possibile pericolo di scosse.

VARIANTI



Testiera Anatomica Moonlight per un maggiore comfort su zigomi e volto in posizione prona. Tappo in dotazione.



Motore SL95/10000N lavora a 10.000 Newton per movimentare il lettino da 49 a 87 cm in altezza in 14 mm al secondo.

OPTIONAL

Possono essere installati anche successivamente all'acquisto del lettino Bolzano.



Ruote piroettanti Serie E per una facile movimentazione del lettino all'interno dello studio.



Safety Box Stop interruttore di sicurezza che isola il lettino dalla corrente elettrica, senza necessità di staccare la presa, al fine di prevenire l'uso pericoloso da parte di terzi.



Porta rotolo carta per velocizzare l'operazione di protezione igienica del lettino e mantenere l'ordine.



Barra laterale ActiveControl per azionare il lettino in salita o in discesa da qualsiasi lato o angolo di lavoro.

Dichiarazione di Conformità

Regolamento Europeo (UE) 2017/745



Declaration of conformity European Regulation (EU) 2017/745

DICHCEREV02021

MODELLI MODELS

LINEA E

PADOVA - VICENZA - TREVISO - VENEZIA - TRENTO - BOLZANO - CORVARA

inclusi rispettivi accessori indicati nei manuali d'uso
including the respective accessories indicated in the user manuals

Classificazione nazionale dispositivi medici National classification of medical device	Numero di repertorio Repertoire number	UDI-DI di base Basic UDI-DI
V0899	2120496	805099912LVLNE0029U

- **Appartengono alla Classe I;**
They belong to the Class I;
- **In tutte le configurazioni comprensive degli accessori associati, sono conformi ai Requisiti Generali di Sicurezza e Prestazione del Regolamento (UE) 2017/745.**
In all the configurations inclusive of all the pertaining accessories, they comply with the General Safety and Performance Requirements of Regulation (EU) 2017/745.

Destinazione d'uso: LETTINI ELETTRICI LINEA E sono lettini di tipo professionale utilizzato da operatori qualificati del settore della riabilitazione e del massaggio.

Intended use: ELECTRIC BEDS LINE E are professional beds used by qualified operators in the rehabilitation and massage sector.

Si dichiara inoltre che per garantire la sicurezza dei prodotti sono state applicate le seguenti norme armonizzate:
We also declare that the following standards have been applied to guarantee the safety of the products:

- CEI EN 60601-1: 2006/A1:2012+A2:2020
- NORMA CEI EN 60601-1-2 (ed. 2003 – A1 2006)
- NORMA CEI EN 60601-2-52 (2016)
- NORMA UNI EN 1334 (ed. 1998)
- NORMA UNI EN 1725 (ed. 2000)
- NORMA UNI EN 1970 (ed. 2006)

Validità del documento: 5 anni
Validity of the document: 5 years

Susegana, il 07/06/2021

GENESI S.r.l.
Il Rappresentante Legale / CEO
Dott. Da Dalto Alberto

CONFORMI AL REGOLAMENTO EUROPEO. PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE.

I lettini Rehatech prodotti in Italia soddisfano gli standard della nuova Dichiarazione di Conformità del Regolamento Europeo (UE) nr. 745/2017 e possono esporre il marchio CE.

Rehatech è stato fra i primi produttori di lettini per fisioterapia in Italia, se non il primo in assoluto, ad aver soddisfatto tali standard e sicuramente ad oggi uno dei pochissimi ad aver già effettuato tale passaggio di conformità.

Genesi Srl con il marchio Rehatech garantisce un prodotto conforme ai requisiti tecnici, alle specifiche del prodotto e al rispetto delle norme applicate.



Vuoi informazioni affidabili, per una scelta professionale e consapevole?

PARLA CON L'ESPERTO

Giannantonio Paladin

Tel. +39 0438 63 555 (int. 903)

Whatsapp +39 392 980 6989

CONTATTACI VIA EMAIL

Rehatech Sales Team

info@genesicompany.it

I NOSTRI ORARI

Dal lunedì al venerdì

8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00



Powered by



Genesi s.r.l. Via Conegliano, 96/30 · 31058 Susegana (TV) · www.genesicompany.it